

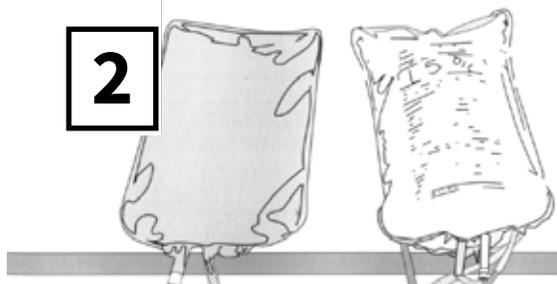
## Как заменить двойной резервуар Twin Bag™

### Не забывайте о следующем:

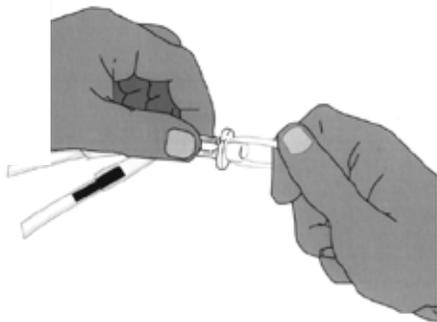
- Ношение маски
- Мытье рук
- Проверку наличия всех необходимых материалов
- Места подсоединения
- Проверку слитой жидкости
- Замену следует проводить в чистом месте, где отсутствуют сквозняки

**1**

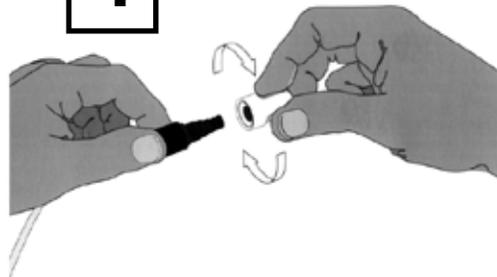
- Наденьте маску и вымойте руки.
- Разложите все необходимое для манипуляции на чистой поверхности.
- Проверьте резервуар Twin Bag™ на: прочность раствора, размер резервуара, срок годности и содержание кальция.
- Проверьте срок годности колпачка MiniCap.

**2**

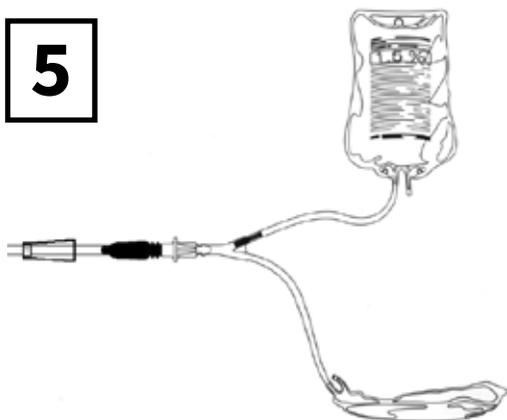
- Откройте резервуар Twin Bag™ и сухой резервуар.
- Проверьте полный резервуар на наличие утечек.
- Проверьте порты для лекарств.
- Проверьте пустой резервуар.
- Проверьте тяговое кольцо, зеленую пломбу и порт Y.

**3**

- Прикрепите клейкой лентой трубки в порту Y к столу.
- Откройте комплект для переливания и проверьте, закрыт ли зажим.
- Наденьте маску и вымойте руки гелем.
- Снимите тяговое кольцо.

**4**

- Снимите колпачок MiniCap из комплекта для переливания.
- Сразу присоедините соединитель Twin Bag™ к комплекту для переливания.

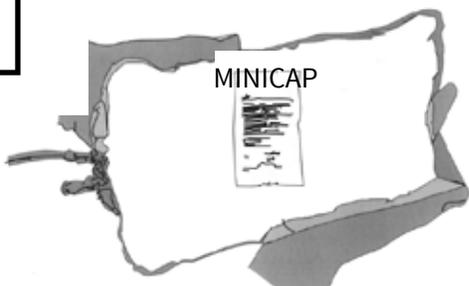
**5**

- Повесьте наполнительный резервуар и поместите дренажный резервуар на стойку.

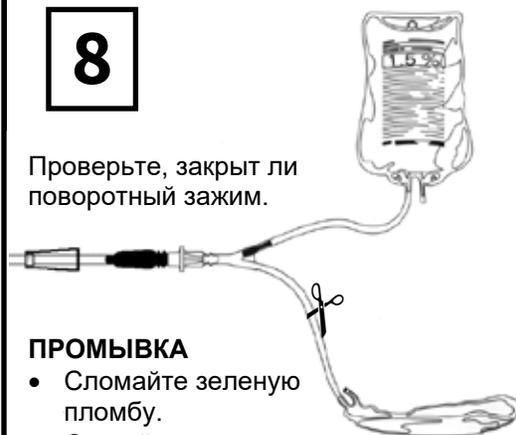
**6****ДРЕНАЖ**

- Откройте поворотный зажим для слива.

- После слива закройте поворотный зажим на комплекте для переливания.
- Установите зажим на сливную линию.
- Положите дренажный резервуар на стол, чтобы проверить его.

**7**

- Проверьте слитую жидкость на:
  - Прозрачность: если жидкость мутная, позвоните в отделение домашнего диализа.
  - Фибрин: если имеется фибрин, добавьте гепарин согласно инструкции.
  - Кровь: если вы также чувствуете боль, позвоните в свое отделение домашнего диализа.

**8**

Проверьте, закрыт ли поворотный зажим.

#### ПРОМЫВКА

- Сломайте зеленую пломбу.
- Откройте зажим на сливной линии на 3 секунды.
- Закройте зажим на сливной линии.

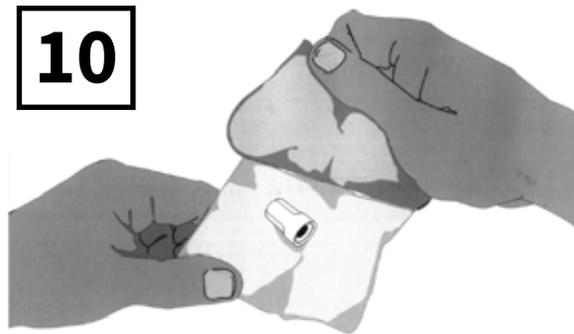
**9**

#### ЗАПОЛНЕНИЕ

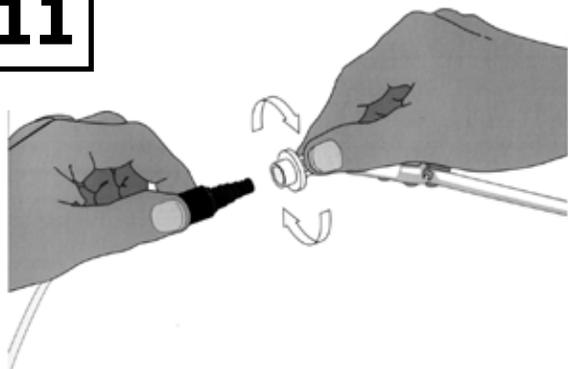
- Откройте поворотный зажим для заполнения.

#### После заполнения:

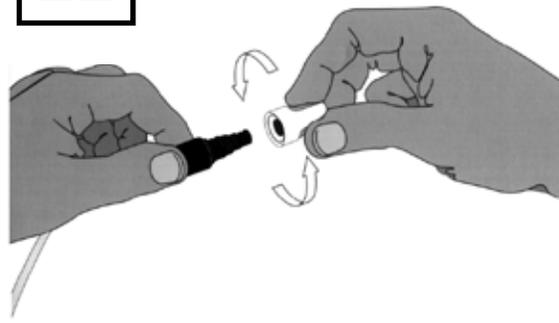
- Закройте поворотный зажим на комплекте для переливания.
- Установите зажим на линию заполнения.
- Проверьте, все ли 3 зажима закрыты.

**10**

- Наденьте маску.
- Вымойте руки гелем.
- Откройте пакет MiniCap.

**11**

- Открутите соединитель Twin Bag™ от комплекта для переливания. Держите комплект для переливания в руке.

**12**

- Немедленно наденьте новый колпачок MiniCap на комплект для переливания.
- Взвесьте дренажный резервуар и запишите вес.

## Проблемы с дренажем - Twin Bag™

Проблема/причина:	Что делать:
1. Поворотный зажим	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте: открыт ли он?</li><li>• Проверьте, не перегнута ли трубка под зажимом</li></ul>
2. Перегиб трубки	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте повязку.</li><li>• Проверьте вдоль сливной линии.</li><li>• Проверьте ленту на стойке.</li></ul>
3. Фибрин	<ul style="list-style-type: none"><li>• Плотно оберните трубку вокруг карандаша и отпустите. (Повторите.)</li></ul>
4. Запор (невозможность покакать)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Принимайте слабительные средства в соответствии с указаниями врача.</li></ul>
5. Положение тела	<ul style="list-style-type: none"><li>• Наклонитесь вперед и назад.</li><li>• Встаньте или нажмите на живот (область живота).</li><li>• Кашляните.</li><li>• Убедитесь, что дренажный резервуар находится ниже вашего живота.</li></ul>
6. Воздушная пробка	<ul style="list-style-type: none"><li>• Плотно оберните трубку вокруг карандаша и отпустите. (Повторите.)</li></ul>
7. Дефектный резервуар	<ul style="list-style-type: none"><li>• Замените комплект на новый.</li></ul>

## Проблемы с наполнением - Twin Bag™

Проблема/причина:	Что делать:
1. Поворотный зажим	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте: открыт ли он?</li><li>• Проверьте, не перегнута ли трубка под зажимом</li></ul>
2. Перегиб трубки	<ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте повязку.</li><li>• Проверьте трубку вдоль.</li></ul>
3. Зеленая пломба не сломана	<ul style="list-style-type: none"><li>• Убедитесь, что зеленая пломба сломана. Вы должны видеть место, где вы сломали зеленую пломбу.</li></ul>
4. Положение тела	<ul style="list-style-type: none"><li>• Наклонитесь вперед и назад.</li><li>• Встаньте или нажмите на живот.</li><li>• Кашляните.</li></ul>
5. Фибрин	<ul style="list-style-type: none"><li>• Плотно оберните трубку вокруг карандаша и отпустите. (Повторите.)</li><li>• Введите гепарин в наполнительный резервуар.</li><li>• Сожмите резервуар.</li><li>• Поднимите стойку.</li></ul>
6. Запор	<ul style="list-style-type: none"><li>• Принимайте слабительные средства в соответствии с указаниями врача.</li></ul>
7. Дефектный резервуар	<ul style="list-style-type: none"><li>• Замените комплект на новый.</li></ul>

## Механические проблемы - Twin Bag™

Проблема/причина:	Что делать:
1. Комплект для переливания загрязнен с закрытым поворотным зажимом	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Наденьте колпачок MiniCap на 5 минут, затем снимите и наденьте другой колпачок MiniCap.</li> </ul>
2. Во время отсоединения от Twin Bag™ не закрылся поворотный зажим на комплекте для переливания	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Закройте поворотный зажим на комплекте для переливания, наденьте колпачок MiniCap на 5 минут, затем снимите и наденьте другой колпачок MiniCap.</li> <li>• <b>НЕМЕДЛЕННО позвоните в отделение домашнего диализа. Это чрезвычайная ситуация для диализа.</b> Дежурная медсестра работает круглосуточно 7 дней в неделю.</li> </ul>
3. Дырка в дренажном резервуаре	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Закройте поворотный зажим на комплекте для переливания, затем зажмите сливную линию. Наденьте колпачок MiniCap на комплект для переливания.</li> <li>• Выньте новую систему Twin Bag™ и продолжайте процедуру диализа.</li> </ul>
4. Дырка в наполнительном резервуаре	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Закройте поворотный зажим на комплекте для переливания.</li> <li>• Зажмите трубку наполнения.</li> <li>• Наденьте колпачок MiniCap на комплект для переливания.</li> <li>• <b>НЕМЕДЛЕННО позвоните в отделение домашнего диализа. Это чрезвычайная ситуация для диализа.</b> Дежурная медсестра работает круглосуточно 7 дней в неделю.</li> </ul>
5. Ваша трубка отсоединяется от катетера: >Точки соединения негерметичны >Катетер и трубка натянуты	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Используйте аварийный комплект. Поместите зажим катетера на катетер рядом с местом выхода.</li> <li>• Наденьте колпачок на конец катетера.</li> <li>• <b>НЕМЕДЛЕННО позвоните в отделение домашнего диализа. Это чрезвычайная ситуация для диализа.</b> Дежурная медсестра работает круглосуточно 7 дней в неделю.</li> </ul>
6. Игла проходит через отверстие нового резервуара	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Используйте новый комплект Twin Bag™, а также новый шприц и иглу.</li> <li>• Используйте новое лекарство.</li> </ul>
7. Новая жидкость попадает в дренажный резервуар	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сделайте еще одну замену резервуара.</li> </ul>
8. Загрязненный соединитель Twin Bag™	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выбросите комплект.</li> <li>• Проверьте и подготовьте новый комплект.</li> </ul>



Эта брошюра предназначена только для образовательных целей. Она не заменяет советы или профессиональное мнение работника медицины. Эта информация не применяется ко всем ситуациям. Если у вас есть какие-либо вопросы, задайте их своему врачу.

Эту брошюру и все наши ресурсы для пациентов можно найти здесь:  
<https://library.nshealth.ca/Patients-Guides> (only available in English)

Свяжитесь с дипломированной медсестрой в Новой Шотландии в любое время:  
Позвоните 811 или перейдите по ссылке: <https://811.novascotia.ca>

*Подготовлено:* Программой лечения почек  
*Иллюстрации использованы с разрешения:* Baxter Health Care ©  
*Designed by:* Nova Scotia Health Library Services

WQ85-0633 © Май 2021 Nova Scotia Health Authority  
Информация в этой брошюре должна обновляться каждые 3 года или по мере необходимости.